

+ Delikatny opatrunek silikonowy zapewniający wilgotne środowisko, optymalne dla prawidłowego procesu gojenia rany; dostępny w różnych kształtach i rozmiarach do trudnych obszarów anatomicznych¹⁻⁷

Smith+Nephew

ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Foam Dressing

Aplikacja opatrunku



1 Oczyszczyć miejsce aplikacji, upewniając się, że otaczająca skóra jest czysta, sucha i wolna od nadmiernego owłosienia. Wybierz odpowiedni rozmiar opatrunku (upewnij się, że wkład chłonny pokrywa całą ranę).




2 Usunąć pierwszą warstwę folii zabezpieczającej z opatrunku i zaaplikować opatrunek stroną adhezyjną na skórę.




3 W razie potrzeby, opatrunek można repozycjonować.


Poniższe zdjęcia wskazują, kiedy opatrunek **ALLEVYN GENTLE BORDER** wymaga zmiany

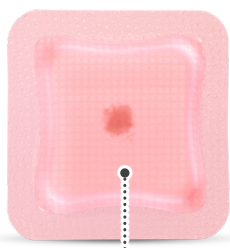

NIE WYMAGA ZMIANY

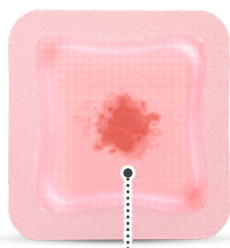

NIE WYMAGA ZMIANY

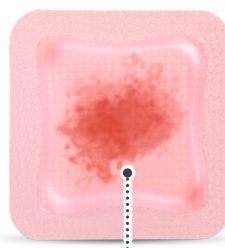

ZMIEN OPATRUNEK

Opatrunek wymaga zmiany po 7 dniach (po 5 dniach w przypadku opatrunków na kości krzyżowej), lub kiedy wysięk widoczny jest w odległości 0,5 cm od krawędzi opatrunku.⁸⁻¹⁰

Zawsze przestrzegaj lokalnego protokołu zmiany opatrunku.

Usuwanie opatrunku

Aby usunąć opatrunek, należy podnieść jeden z brzegów opatrunku i powoli, delikatnie odrywać, aż do całkowitego usunięcia z rany.



ALLEVYN GENTLE BORDER kody zamówieniowe

Rozmiar (cm)	Kod	Opakowanie
7.5cm x 7.5cm	66800269	10 sztuk
10cm x 20cm	66800900	10 sztuk
12.5cm x 12.5cm	66800272	10 sztuk
17.5cm x 17.5cm	66800273	10 sztuk
17.1cm x 17.9cm Multisite	66800959	10 sztuk
10cm x 10cm	66800270	10 sztuk
15cm x 15cm	66800975	10 sztuk
23cm x 23.2cm Heel	66800506	5 sztuk
16.8cm x 17.1cm Sacrum	66800898	10 sztuk
21.6cm x 23cm Sacrum	66801031	10 sztuk

OPATRUNKI
REFUNDOWANE

W celu uzyskania szczegółowych informacji o produkcie w zakresie wskazań do stosowania, przeciwwskazań, środków ostrożności i ostrzeżeń, przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użycia produktu (IFU).

Referencje 1. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK. 2009;5(3):32-44. 2. Smith & Nephew 2016. ALLEVYN Gentle Border Heel Gen 2 - physical evaluation. Internal Report. DS/16/465/R. 3. Smith & Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border Gen 2 - Physical Evaluation. Internal Report. DS/16/424/R V3. 4. Smith & Nephew 2019. Use of Moisture Vapour Permeability (MVP) and Moisture Vapour Transmission Rate (MVTR) data to support product claims referring to moist wound healing. Internal report. EO.AWM.PCSgen.001.v2 5. Rafter L, Reynolds T, Rafter M. An audit of patient outcomes in the management of skin tears using silicone dressings. Wounds UK. 2016;12(2):70-78. 6. Callaghan R, Chadwick P, Mahoney K, Stephen-Haynes J. Case series evaluation: The use of Allevyn gentle border multisite on chronic wounds. Wounds UK. 2012;8(4):110-118. 7. Hampton S. An evaluation of a silicone adhesive shaped heel dressing. Br J Nurs. 2010;19(6):S30-33. 8. Smith & Nephew 2017. An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. Internal Report. GMCA-DOF-10. 9. Smith & Nephew 2017. An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing. Internal Report. GMCA-DOF-09. 10. Smith & Nephew 2017. ALLEVYN Gentle Border wound model - 10 x 10. Internal Report. DS/17/491/R.